


GÖBEK KATETERİ

YENİ DOĞAN

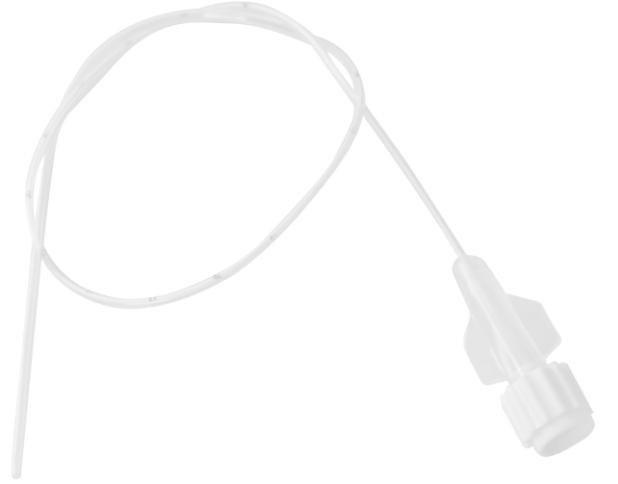

Kullanım Amacı

Umbilikal ve göbek kordonunda yer alan damarlara yerleştirilen kateterler yeni doğan yoğun bakımının standart bir bileşenidir. Göbek toplardamarına kateter yerleştirmek, derin bir toplardamara ulaşmanın en hızlı ve kolay yollarından birisidir. Yeni doğanlarda çevresel toplardamarlar yerine umbilikal ve göbek kordonunda yer alan toplardamarların kateterizasyonunun bilinen avantajları şunlardır: total parenteral beslenme olanağı, pek çok ilacın güvenli verilebilmesi, kan ürünlerinin kolayca verilebilmesi, çevresel damarların tekrarlı delinmesinin yarattığı stres ve acının ortadan kaldırılması.

Göbek atardamarının kateterizasyonunun amaçları arasında yeni doğanın solunumuna yardımcı olmak, kan gazları ve basıncının gözlenmesi, kan basıncı düzenlemesi için kuvvetli ilaçların verilmesi sayılabilir.



Özellikler

- Kateter uzunluğu: 30 cm
- 3.5 Fr, 5 Fr ve 7 Fr dış çaplarında üç modeli vardır.
- Arter ve Ven kateterizasyonunda kullanılabilir.
- Kateter hammaddesi TPU (Termosensitif Poliüretan) dur.
- Termosensitif olması sayesinde damar içine girerken yeterli katılığı sağlayıp vücut içinde yumuşayarak damarlara zarar vermesini engeller.
- DEHP içermez.
- 4 cm ile 25 cm arasında 1 cm aralıklı olarak işaretçiler vardır.
- Yuvarlatılmış uç kısmı damarın tahriş olup zarar görmesini önler.
- Radyopaktr.
- Steril ve tek kullanımlıktır.

Modeller

REF	05TD0225	Göbek Kateteri 3,5 Fr
REF	05TD0268	Göbek Kateteri 5 Fr
REF	05TD0269	Göbek Kateteri 7,5 Fr

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

☎ +90 232 2908929 ✉ cservices@pergomed.com
🌐 www.pergomed.com